

# Medizin- produkte

## Symbole & ihre Bedeutungen



**Hersteller des Produktes**



**Herstellungsdatum  
des Medizinproduktes**



**Händler**



**Patientennummer**



**Verwendbar bis jjjj-mm-tt**

Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.



**Verwendungsdauer**

Haltbarkeit nach der Öffnung, Zahl der Monate steht im Symbol/daneben.



**durchgekreuzte Mülltonne**

Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Balken unterhalb der Mülltonne bzw. eine Datumsangabe zeigen an, ob bzw. wann das Produkt nach dem 13.08.2005 in Verkehr gebracht wurde.



**Anzahl der Verwendungen  
minus eins**

Um die Anzahl der empfohlenen Verwendungen minus eins anzuzeigen, muss in das Symbol eine Zahl eingefügt werden. ANMERKUNG: bspw. die Zahl 12



**einmaliger Gebrauch,  
nicht wiederverwenden**



**Fertigungslosnummer, Charge**

Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge/ das Los identifiziert werden kann.



**Artikelnummer**

zur Identifikation des Medizinproduktes



**Seriennummer**

zur Identifikation des Medizinproduktes



**Kennzeichner der  
DataMatrix als UDI**



**„Medical Device“  
Medizinprodukt**



**Bevollmächtigter  
in der Europäischen  
Gemeinschaft**



**CE-Kennzeichnung**

Bestätigung der Erfüllung der EU-Anforderungen



**diese Seite oben**

Zeigt die Ausrichtung des Produkts während des Transportes.



**Information über den  
Rohstoff der Verpackung**



**single patient, multiple use**

einzelner Patient,  
mehrfach anwendbar



**Inhalt bei beschädigter  
Verpackung nicht verwenden**



**Gebrauchsanweisung**




**Achtung**

Lesen Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung.



**nach dem Gebrauch wegwerfen**

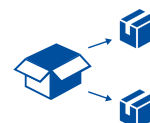

**Repacking  
umpacken**



**trocken aufbewahren  
vor Feuchtigkeit schützen**



**zerbrechlich,  
mit Sorgfalt handhaben**



**vor Sonnenlicht schützen**

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|     | <b>Temperaturbegrenzung</b><br>Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.                             |     | <b>Luftfeuchte, Begrenzung</b><br>Bezeichnet den Feuchtigkeitsbereich, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.                    |     | <b>enthält oder Anwesenheit von Phtalate (gilt derzeit nur in der EU)</b><br>(Weichmacher, Diethylhexylphthalat= DEHP)                       |
|    | <b>enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex</b>   |    | <b>Website zur Patienteninformation</b>   |    | <b>keine Chemischreinigung</b>   |
|    | <b>professionelle Textilpflege<br/>professionelle Chemischreinigung und Nassreinigung</b>   |    | <b>professionelle Chemischreinigung mit Tetrachlorethen und sämtlichen unter dem Symbol F aufgeführten Lösemitteln</b><br>normaler Prozess      |    | <b>professionelle Chemischreinigung mit Tetrachlorethen und sämtlichen unter dem Symbol F aufgeführten Lösemitteln</b><br>schonender Prozess |
|    | <b>prof. Chemischreinigung mit Kohlenwasserstoffen (Destillationstemp. zwischen 150–210°C, Flammpunkt zwischen 38–70°C)</b><br>schonender Prozess |    | <b>prof. Chemischreinigung mit Kohlenwasserstoffen (Destillationstemp. zwischen 150–210°C, Flammpunkt zwischen 38–70°C)</b><br>normaler Prozess |    | <b>keine professionelle Nassreinigung</b>  |
|    | <b>professionelle Nassreinigung</b><br>normaler Prozess   |    | <b>professionelle Nassreinigung</b><br>schonender Prozess   |    | <b>professionelle Nassreinigung</b><br>sehr schonender Prozess   |
|    | <b>schonende Behandlung</b><br>unter dem Waschsymbolsymbol  |    | <b>sehr schonende Behandlung</b><br>unter dem Waschsymbolsymbol   |    | <b>waschen allgemein</b>   |
|    | <b>Handwäsche, Höchsttemperatur 40°C</b>  |    | <b>nicht waschen</b>  |    | <b>Behandlung nicht erlaubt</b>  |
|   | <b>maximale Waschttemperatur 40°C</b><br>normaler Prozess   |   | <b>maximale Waschttemperatur 40°C</b><br>schonender Prozess   |   | <b>maximale Waschttemperatur 40°C</b><br>sehr schonender Prozess   |
|  | <b>bleichen, alle Bleichmittel zulässig</b>   |  | <b>bleichen, nur Sauerstoffbleiche/ chlorfreie Bleiche zulässig</b>   |  | <b>nicht bleichen</b>  |
|  | <b>trocknen im Wäschetrockner möglich, normale Temperatur</b>   |  | <b>trocknen im Trockner mögl., max. Ausgangstemperatur 60°C</b>   |  | <b>trocknen im Trockner mögl., max. Ausgangstemperatur 80°C</b>  |
|  | <b>nicht im Wäschetrockner trocken</b>  |  | <b>trocknen auf der Wäscheleine</b>   |  | <b>trocknen auf der Wäscheleine im Schatten</b>  |
|  | <b>trocknen auf der Wäscheleine aus dem tropfnassen Zustand</b>   |  | <b>trocknen auf der Wäscheleine aus dem tropfnassen Zustand im Schatten</b>   |  | <b>liegend trocknen</b>  |
|  | <b>liegend trocknen im Schatten</b>   |  | <b>liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand</b>   |  | <b>liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten</b>  |
|  | <b>Bügel- und Pressvorgang</b><br>bügeln, allgemein   |  | <b>bügeln, Höchsttemperatur der Eisensole 110°C ohne Dampf</b><br>bei Dampf irreparable Schäden   |  | <b>bügeln, Höchsttemperatur der Eisensole von 150°C</b>  |
|  | <b>bügeln, Höchsttemperatur der Eisensole von 200°C</b>   |  | <b>nicht bügeln</b>   |  | <b>Behandlungstemperatur</b><br>beim Trocknen, Bügeln, Waschsymbolsymbol   |

#### Haftung für Darstellungen und Inhalte

Die Symbolliste der eurocom e.V. erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Genauigkeit der Symbolzeichen oder Aktualität. Sie dient reinen Informationszwecken, insbesondere zur einheitlichen Verwendung der Symbole durch die Mitglieder der eurocom e.V. Aufgrund regelmäßiger Anpassungen der entsprechenden Normen empfehlen wir im Zweifelsfall in diesen nachzusehen, um die Richtigkeit und/oder Bedeutung der Symbole zu prüfen.

#### Herausgeber

eurocom e.V. – European Manufacturers Federation for Compression Therapy and Orthopaedic Devices  
Reinhardtstraße 15 · D - 10117 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 - 25 76 35 060 · Fax: +49 (0) 30 - 25 76 35 069  
E-Mail: info@eurocom-info.de · www.eurocom-info.de

Februar 2020